

da Sugrens rengøring & desinfektion

PoloDent Suction Disinfection • Rengørings- og desinfektionskoncentrat til daglig rengøring og vedligeholdelse af dentale sugesystemer. Kan bruges til våde, tørre og halvtørre sugesystemer.

Brugsanvisning, daglig: Tilsæt 20 ml ± 1 ml koncentrat til 980 ml varmt vand (2 % opløsning). Aspirér via sugeslanger med høj og lav volumen. Lad opløsningen blive siddende i mindst 15 minutter (for at opnå fuld virkning skal den blive siddende i 60 minutter), og skyl så grundigt efter med rent vand. Kun til professionel anvendelse.

Effektivt spektrum: Bakteriedræbende (15 minutter) herunder *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila*. Yeasticidal (15 minutter). Hepatitis B-virus (15 minutter) hepatitis C-virus (15 minutter), human immunodefekt virus (15 minutter), TuberculoCID (60 minutter). afsvampningsmidler (30 minutter).

Testet ifølge standarderne: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Sammensætning: Vand, Dimethyldioctylammoniumchlorid, dipropylenglycol, 2-aminoethanol, Tetranatrium ethylenediaminetetraacetat, Ethanol, Citronsyre, nonionisk overfladeaktivt middel, antiskum, farvestof.

Fare:
H314: Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
P260: Indånd ikke pulver/røg/gas/låge/damp/spray.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P330+P331: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden.
Fremkald IKKE opkastning.
P303+P361+P353: VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340: VED INDÅNDNING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Opbevaring:
P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P235: Opbevares køligt.
Kontraindikationer:
Materialer, der skal udgås: Kobber, Aluminium.
Forhold vedrørende bortskaffelse:
Må ikke udledes i afløb eller vandløb.

Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med dette medicinske udstyr, skal inberettes til producenten og de kompetente myndigheder.

sv Rengörings- och desinfektionsmedel för sugsystem

PoloDent Suction Disinfection • För daglig rengöring och underhåll av dentala sugsystem. Kan användas för våta, torra och semi-torra sugsystem.

Bruksanvisning, för varje dag: Blanda 20 ml ± 1 ml av koncentratet med 980 ml ljummet vatten (2 % lösning). Aspirera genom hög- och lågvolymsugrören. Låt verka i minst 15 minuter (60 minuter för att uppnå full effekt) och skölj sedan noggrant med rent vatten. Endast för professionellt bruk.

Effektivt spektrum: Bactericid (15 min) inklusive *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila*. Jästicid (15 min). Hepatitis B virus (15 min) Hepatitis C virus (15 min), HIV (15 min). TuberculoCID (60 min). Fungicid (30 min).

Testad enligt standarder: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Sammensättning: Vatten, Dimetyldioctylammoniumklorid, dipropylenglycol, 2-aminoethanol, tetranatrium-EDTA, etanol, citronsyra, nonjontensider, antiskummedel, färgämne.

Fara:
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331: VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.
P304+P340: VID INÅNDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Lagring:
P403+P233: Förvaras på väl ventilerat plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
P235: Förvaras svalt.
Kontraindikationer:
Oförenliga material: Aluminium. Koppar.
Avfallshantering:
Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag.

Alla allvarliga incidenter relaterade till denna medicintekniska produkt måste rapporteras till tillverkaren och de behöriga myndigheterna.

no Rense- og desinfeksjonsmiddel på aspirator

PoloDent Suction Disinfection • Rengjører og desinfiserende konsentrat for daglig rengjøring og vedlikehold av dentale sugesystemer. Kan brukes for våte, tørre og semi-tørre sugesystem.

Bruksanvisning, daglig: Tilssett 20 ml ± 1 ml av konsentratet til 980 ml varmt vann (2 %-løsning). Aspirer gjennom sugeslangene for høyt og lavt volum. La stå i minst 15 minutter (for å oppnå full effekt, skal det stå i 60 minutter) og skyl så grundig med rent vann. Kun til profesjonell bruk.

Effekt: bakteriedrepende (15 min) inkludert *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila*. Gjærdrepende (15 min). hepatitt B-virus (15 min) hepatitt C-virus (15 min), humant immunsviktvirus (15 min). Tuberculosidal (60 min). Soppdrepende (30 min).

Testet til standarder: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Sammensetning: Vann, Dimetyldioctylammonium klorid. Dipropylene glycol, 2-aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, etanol, Citric acid, Non-ionic surfactant, Antiskum, Farge.

Fare:
H314: Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.
P260: Ikke pust inn støv/røyk/gass/ damp/spray.
P280: Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P301+P330+P331: VED SVELGING: Rens munnen, IKKE fremkald oppkast/brekning.
P303+P361+P353: VED BERØRING AV HUD (eller hår): Ta øyeblikkelig av kontaminerte klær. Skyl huden med vann.
P304+P340: VED INHALERING: Flytt personen ut i frisk luft, pust normalt.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom det lar seg gjøre, fortsatt å skylle.
Lagring:
P403+P233: Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P235: Oppbevares kjølig.
P410: Beskyttes mot sollys.
Kontraindikasjoner:
Unggå følgende forhold: Varme.
Avfallsbehandlingsvurdering:
Må ikke slippes ut i avløp eller elver.

Enhver alvorlig hendelse knyttet til dette medisinske utstyret må rapporteres til produsenten og ansvarlige myndigheter.

fi Imulaitteiden puhdistus- ja desinfiointiaine

PoloDent Suction Disinfection • Puhdistus- ja desinfiointiaine tiivistie imulaitteiston päivittäiseen puhdistukseen ja huoltoon. Voidaan käyttää märän linja, kuivan linjan ja semi märkä/kuiva-linjan imujärjestelmissä.

Käyttöohjeet, kerran päivässä: Lisää 20 ml ± 1 ml tiivistettyä 980 ml:aan lämmintä vettä (2 % liuos). Aspiroi suur- ja pienvolyymisten imuputkien läpi. Anna vaikuttaa vähintään 15 minuuttia (täysi teho saavutetaan 60 minuutin vaikutusajalla) ja huuhtelee sitten huolellisesti puhtaalla vedellä. Vain ammattikäyttöön.

Vaikutuskirjo: Bakteereita tappava vaikutus (15 min) *Salmonella typhimurium*, *Legionella pneumophila*. Hiivoja tappava vaikutus (15 min), hepatiitti B -virus (15 min) hepatiitti C -virus, (15 min), HIV (15 min). Tuberkuloosibakteereja (60 min). Sieniä tappava (30 min).

Testattu seuraavien standardien mukaan: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Koostumus: Vesi, Dimetyyliammoniumkloridi, Dipropyleenglykoli, 2-aminoetanoli, tetranatriummetyyleeni-diamiinitetra-asetatti, etanoli, sitruunahappo, ioniton pinta-aktiivinen aine, vaahdotamisen estoaine, väri.

Vaara:
H314: Aiheuttaa vakavia palovammoja ja silmävaurioita.
P260: Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/spraytä.
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmäsuoja/kaasuoja.
P301+P330+P331: Jos ainetta niellään: huuhtelee suu. ÄLÄ oksennuta.
P303+P361+P353: Jos ainetta joutuu iholle (tai huiksin), riuhi heti kontaminoituneet vaatteet, huuhdo iho vedellä.
P304+P340: Jos ainetta on hengitetty, vie henkilö raikkaaseen ilmaan.
P305+P351+P338: Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sinulla sellaiset on ja poistaminen tapahtuu helposti. Jatka huuhtelua.
Varastointi:
P403+P233: Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P235: Säilytä viileässä.
Vasta-aiheet:
Yhteensopimattomat materiaalit: Kupari, Alumiini.
Hävittäminen:
Älä kaada viemäreihin tai jokiin.

Kaikista tähän lääkinnälliseen laitteeseen liittyvistä vakavista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle ja toimivaltaisille viranomaisille.


WSP 01-2207

POLO DENT®

Suction Disinfection CONCENTRATE

en Cleaning & disinfection of suction systems
nl Afzuigstroomreining & -desinfectie
fr Nettoyant & désinfectant des systèmes d'aspiration
de Sauganlagenreinigung & Desinfektion
pl Środek do czyszczenia i dezynfekcji ssaków
da Sugrens rengøring & desinfektion
sv Rengörings- och desinfektionsmedel för sugsystem
no Rense- og desinfeksjonsmiddel på aspirator
fi Imulaitteiden puhdistus- ja desinfiointiaine

2,5 L

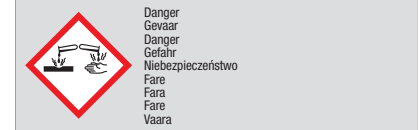

Danger
Gevaar
Danger
Gefahr
Niebezpieczeństwo
Fara
Fara
Fara
Vaara

REF 83 00 30



UFI: J110-E062-M003-J8G9

LOT

see bottle



Polo MB Oisterwijk BV
Laarakkerweg 5
5061 JR Oisterwijk, The Netherlands

Topdental (Products) Ltd
12 Ryefield Way, Sliden
W. Yorks, BD20 0EF England, UK

MD

EC REP DIRECTA AB
P.O. Box 723, Fimings väg 8 SE-194 27
Upplands Väsby, Sweden

CE
1639

en Cleaning & disinfection of suction systems

PoloDent Suction Disinfection • For the daily cleaning and maintenance of dental aspirator systems. Can be used on wet line, dry line and semi wet/dry line suction systems.

Directions for use, daily: Add 20ml ± 1ml of concentrate to 980ml warm water (2% solution). Aspirate via the high and low volume suction tubes. Leave for a minimum of 15 minutes to achieve full efficacy leave for 60 minutes) and then rinse thoroughly with clean water. For professional use only.

Efficacy: Bactericidal (15mins) including Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Yeastcidal (15mins). Hepatitis B virus (15mins), Hepatitis C virus (15mins), Human Immunodeficiency Virus (15mins). Tuberculocidal (60mins). Fungicidal (30mins).

Tested to Standards: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Composition: Aqua, Dimethyldiethylammonium chloride, Dipropylene glycol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium ethylene diamine tetracetate, Ethanol, Citric acid, Nonionic surfactant, Antifoam, Dye.

Danger:

H314: Causes severe skin burns and eye damage.
P260: Do not breathe dust/ fumes/gas/mist/vapours/spray.
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
P301+P330+P331: IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
P303+P361+P353: IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water.
P304+P340: IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

Storage:

P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.

P235: Keep cool.

Contraindications:

Incompatible materials: Aluminium, copper.

Disposal:

Do not discharge concentrate into drains or rivers.

Any serious incident related to this medical device must be reported to the manufacturer and the competent authorities.

nl Afzuigstelsystemreiniging & -desinfectie

PoloDent Suction Disinfection • Voor het dagelijks reinigen en het onderhouden van dentale afzuigsystemen. Kan gebruikt worden voor natte, droge en semi natte/droge afzuigsystemen.

Gebruiksaanwijzing, dagelijks: Voeg 20 ml ± 1 ml van het concentraat toe aan 980 ml warm water (oplossing met een concentratie van 2%). Inspireer via de aanzuigslangen voor hoog en laag volume. Minimaal 15 minuten laten inwerken (voor volledige werkzaamheid 60 minuten laten inwerken) en daarna grondig spoelen met schoon water. Alleen voor professioneel gebruik.

Werkingspectrum: Bactericide (15 min) inclusief Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. gisten (15 min). Hepatitis B virus (15 min) Hepatitis C virus (15 min), HIV (15 min). Tuberculocide (60 min). Fungicide (30 min).

Getest volgens de normen: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Samenstelling: Water, Didecyl dimethylammoniumchloride, Dipropyleenglycol, 2-aminoethanol, tetranatrium ethyleendiaminetetraazijnzuur, ethanol, citroenzuur, niet-ionische oppervlakteactieve stof, antischuim, kleurstof.

Gevaar:

H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
P260: Stof/rook/gas/nevel/damp/sputnevel niet inademen.
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+P330+P331: NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304+P340: NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Opslag:

P403+P233: Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P235: Koel bewaren.

Contraindicaties:

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Aluminium. Koper.

Instructies voor verwijdering:

Product niet in riolering of oppervlaktewater lozen.

Elk ernstig voorval in verband met dit medisch hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten.

fr Nettoyant et désinfectant des systèmes d'aspiration

PoloDent Suction Disinfection • Pour le nettoyage quotidien et le maintien des systèmes d'aspiration dentaires. Peut être utilisé sur les systèmes en ligne d'aspiration humide, sèche et semi humides/sèches.

Mode d'emploi, une fois par jour: Ajouter 20 ml ± 1 ml de concentré à 980 ml d'eau tiède (solution à 2 %). Aspirer au moyen des tubes d'aspiration de faible volume et de gros volume. Attendre au moins 15 minutes (pour une efficacité totale, attendre 60 minutes), puis rincer abondamment avec de l'eau propre. Pour un usage professionnel exclusivement.

Spectre effectif: Bactéricide (15 minutes) y compris Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Levuricide (15 minutes). le virus de l'hépatite B (15 minutes) le virus de l'hépatite C (15 minutes), VIH (15 minutes). Tuberculocide (60 minutes). Fongicide (30 minutes).

Testé aux normes: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Composition: Eau, Chlorure de didécyl-di-méthylammonium, Dipropylène glycol, 2-aminoéthanol, Sel tétra sodique de l'acide éthylènediaminetétraacétique, éthanol, acide citrique, tensioactif non ionique, antimousse, colorant.

Danger:

H314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
P260: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P301+P330+P331: EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.
P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Storage:

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P235: Tenir au frais.

Contre-indications:

Matières incompatibles: Aluminium. Cuivre.

Procédures d'élimination:

Ne pas rejeter le concentré dans les égouts ou les rivières.

Tout incident grave lié à ce dispositif médical doit être signalé au fabricant et aux autorités compétentes.

de Sauganlagenreinigung & Desinfektion

PoloDent Suction Disinfection • Für die tägliche Reinigung und Pflege von zahnärztlichen Absauganlagen. Kann für alle Absaugsysteme verwendet werden.

Gebruchsanweisung, täglich: Geben Sie 20 ml ± 1 ml des Konzentrats zu 980 ml warmem Wasser (2%ige Lösung). Saugen Sie über den weit- bzw. englumigen Saugschlauch an. Für mindestens 15 Minuten einwirken lassen (um volle Wirkung zu erreichen, 60 Minuten einwirken lassen) und danach gründlich mit Reinwasser abspülen. Nur für den professionellen Gebrauch bestimmt.

Wirkungsspektrum: Bakteriziden (15 Min) einschließlich Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Levuroziden (15 Min). Hepatitis-B-virus (15 Min) Hepatitis-C-Virus (15 Min), HIV (15 Min). Tuberkuloziden (60 Min). Fungiziden (30 Min).

Geprüft nach den Standards: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Zusammensetzung: Aqua, Didecyl dimethylammoniumchlorid, Dipropylenglykol, 2-Aminoethanol, Tetrasodium Ethylendiamintetraessigsäure, Ethanol, Zitronensäure, Nichtionische Tenside, Antischaummittel, Farbstoff.

Gefahr:

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
P303+P361+P353: BEI BЕРÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Lagerung: P403+P233: Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
P235: Kühl halten.
Kontraindikationen: Unverträgliche Materialien: Aluminium. Kupfer.
Entsorgungsverfahren: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer ableiten.

Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt ist dem Hersteller und den zuständigen Behörden unverzüglich zu melden.

pl Środek do czyszczenia i dezynfekcji ssaków

PoloDent Suction Disinfection • Do codziennego mycia i konserwacji systemów dentystycznych. Może być stosowane na mokrych, suchych i umiarkowanie mokrych/suchych liniach systemów ssących.

Sposób użycia: Dodać 20 ml ± 1 ml koncentratu do 980 ml ciepłej wody (roztwór o stężeniu 2%). Zaaspirować przez wysoko- i niskobojęściowe przewody podciśnieniowe. Pozostawić na co najmniej 15 minut (dla osiągnięcia pełnej skuteczności odczekać 60 minut), a następnie dokładnie wypłukać czystą wodą. Tylko do użytku profesjonalnego.

Spektrum działania: bakteriobijące (15 min) w tym Salmonella typhimurium, Legionella pneumophila. Drożdżakobójcze (15 min). wirus zapalenia wątroby typu B (15 min) wirus zapalenia wątroby typu C (15 min), HIV (15 min). grzybiący (60 min), grzybobójcze (30 min).

Przebadano zgodnie z normami: EN14885, EN14476, EN14348, EN13727, EN13697, EN13624, ASTM E1052.

Skład: Woda, Chlorek dimetylodioctyloamoniowy, glikol dipropylenowy, 2-aminoetanol, etylenodiaminotetraoctan tetrasodu, etanol, kwas cytrynowy, niejonowy środek powierzchniowo czynny, środek przeciwpieniący, barwnik.

Niebezpieczeństwo:

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. P304+340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDCHOWYCH: wyprzedaż lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305/351/336: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal spłukać.
Magazynowanie: P403+P233: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P235: Przechowywać w chłodnym miejscu.

Przeciwwskazania:

Materiały niezgodne: Glin. Międz.

Postępowanie z odpadami:

Nie wylewać do kanalizacji lub do rzeki.

Wszelkie poważne przypadki związane z tym wyrobem medycznym należy zgłaszać producentowi i właściwym władzom.