30001094 07.26

Lab-Putty

Bruksanvisning SV

Läs noga igenom bruksanvisningen före användning av produkten. Spara den för framtida bruk.

PRODUKTBESKRIVNING
Lab-Putty är en elastomerisk putty för användning i dentallaboratorier.

SAMMANSÄTTNING
Polysiloxan, kondensationshärdande elastomer.
Aktivatorn innehåller: Silanamin, 1,1,1-trimetyl-N-(trimetylsilyl)-, hydrolysprodukter med kisel, vit mineralolja (petroleum), alkylsilikater, dioktyltennoxid, dioktylten-dineodekanat

AVSEDD ANVÄNDNING
Lab-Putty är uteslutande avsedd för extraoral applicering.
Den är avsedd för tillverkning av:
- Matris för allmän ocklusion och funktionella modeller, matris som positioneringshjälpmedel för klämmor, proteser (dvs. partiella proteser, tillfälliga partiella proteser, ortodontiska retainers etc.), matris för tillverkning av munskydd COLTENE GI-MASK.
- Reparationsmodeller (underkäksproteser med djupa underskärningar)
- Block-outs
- Reliefstämpel (form) för hårdgommen
- Matris för positionering av labiala och buckala delar av ansiktet

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Lab-Putty Activator
MÄRK



GHS02 GHS08 GHS07


⚠VARNING

H228	Brandfarligt fast ämne.
H315	Irriterar huden.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H371	Kan orsaka organskador. (Lymfsystemet) (Oral)
H373	Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering. (Andningsorganen) (Inandning)
H413	Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
P210	Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P260	Andas inte in dimma/ångor/sprut.
P264	Tvätta alla yttre ytor på kroppen noggrant efter hantering.
P270	Ät, drick eller rök inte när du använder denna produkt.
P271	Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.
P273	Undvik utsläpp i miljön.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd och ansiktsskydd.
P302+P352	VID KONTAKT MED HUDEN: Tvätta med rikligt med vatten.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att personen kan andas bekvämt.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja.
P308+P311	VID exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare/sjukvårdspersonal/första hjälpen-personal.
P312	Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/sjukvårdspersonal/första hjälpen-personal om du mår dåligt.
P332+P313	Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P337+P313	Om ögonirritationen kvarstår: Sök läkarhjälp.
P403+P233	Förvaras på en väl ventilerad plats. Förvara behållaren tätt tillsluten.
P405	Förvara inlåst.
P501	Kassering: Lämna innehåll/behållare till godkänd insamlingsplats för farligt eller särskilt avfall i enlighet med lokala förordningar.
P362+P364	Ta av kontaminerade kläder och tvätta dem innan de används igen.

VIKTIGT
Inga skadliga reaktioner eller biverkningar på personer som utsätts för produkten är kända vid avsedd användning. På grund av aktivatorns beskaffenhet bör dock lämpliga försiktighetsåtgärder iakttas vid hantering.


ANVÄNDARGRUPP
Produkten får enbart användas av kvalificerade tandläkare och tandtekniker.

KORREKT ANVÄNDNING
Dosering

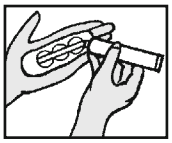

Mät upp Lab-Putty Base med måttskeden (ta bort överskott). Sprid ut den uppmätta mängden på handflatan. För varje skopa Base trycker du en gång med skedens kant i massan. Dosera en trådlängd Lab-Putty aktivator per cirkeldiameter.
Stäng tuben omedelbart efter användning.

Blandning

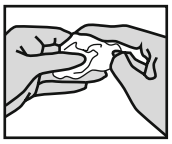

Vik in materialet och knåda med fingertopparna i 30–45 sekunder tills en homogen, rosa färgad blandning uppstår.

Härdningstid
Min. 5–7 min vid rumstemperatur. Intensiv blandning, höga temperaturer eller överdosering av aktivatorn påskyndar härdningen. Låga temperaturer och underdosering av aktivatorn fördröjer härdningen. Max. överdosering/underdosering: 20 %.

HÅLLBARHET/LAGRING
Utgångsdatum: och LOT: se primärförpackningen
Förvaringstemperatur: 15–23 °C / 59–73 °F.
Relativ luftfuktighet: 50 % ± 10 %.
Hållbarhet för bruten förpackning: 3 månader.
Får ej utsättas för värme eller solljus. Undvik extrema temperaturförändringar.

Avtrycken ska förvaras vid normal rumstemperatur, undvik exponering för värme och solljus.

KASSERING
Se säkerhetsdatabladet på www.coltene.com

TEKNISKA DATA
Tekniska data ISO 4823
Mätningarna baseras på en rumstemperatur på 23 °C / 73 °F och 50 % relativ luftfuktighet. (Högre temperaturer förkortar och lägre temperaturer förlänger tiderna)

Blandningstid:	0:30–0:45 min
Total arbetstid:	1:30 min
Härdningstid:	5:00–7:00 min
Shore A-hårdhet:	63–70

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET
Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med denna produkt måste omedelbart rapporteras till tillverkaren.

SAFETY DATA SHEET (SDS) / 安全数据单
www.coltene.com

Glossary / 解释

Consult instructions for use
查阅使用说明书

REF **Reference Number**
产品编号

Expiry Date
有效期

LOT **Batch Code**
批号

Keep away from sun light
怕晒，避光保存

Temperature limitation
温度极限

COLTENE International Dental Group

Coltene/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
T +41 71 757 5300
F +41 71 757 5301

Customer Service / 客户服务
service@coltene.com

COLTENE