

Young gummikoppar & engångshuvuden



PEOPLE HAVE PRIORITY



YOUNG
DENTAL MANUFACTURING




YOUNG gummikoppar och borstar är kända över hela världen för sin kvalitet, effektivitet och kliniska fördelar för patienten.

Använd Young gummikoppar med W&H putsvinkelstycke WP-64 M Trippelseal. Denna kombination medför en unik tätning (sitter i varje kopp) mellan kopp och huvud som utestänger blod, saliv och putspasta vilket resulterar i en lång livslängd på instrumentet samt bästa hygien.

Ref WP-64 M - 10216403

Petite

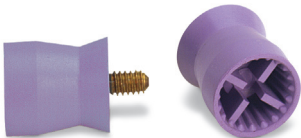

NYHET!

Elite



Petitekoppen har länge varit en mycket populär och efterfrågad kopp som är kortare än de övriga och tillverkad i gummi som inte innehåller något latex. Liten och smidig och insidan är webbed.

Ref Petite latexfri mjuk lila - 054601 *Vår storsäljare!*

Ref Petite latexfri hård blå - 054701

Vår senaste nyhet är koppen Elite som blivit lovordad av tandhygienister över hela världen för att den rengör så effektivt och inte stänker runt polerpastan. **Ref Elite latexfri mjuk lila 144 st - 053901**



Webbed If



Webbed



Webbed - latexfri. Koppens insida medför ett snabbt och effektivt avlägsnande av plack.

Ref kopp latexfri mjuk lila Webbed 144 st - 054101

Ref kopp latexfri hård blå Webbed 144 st - 054201

Webbed. Koppens utformning medför ett snabbt och enkelt avlägsnande av plack. **Ref kopp mjuk grå Webbed 144 st - 051101**

Ref kopp hård vit Webbed 144 st - 051301



Latexfri sapon hård blå & Latexfri sapon mjuk lila



Passar till KaVo:s vst. En puts kopp för en mycket effektiv rengöring.

Latexfri sapon hård blå 144 st - ref 051201

Passar till KaVo:s vst. En puts kopp för en mycket effektiv rengöring.

Latexfri sapon mjuk lila 144 st - ref 051801



Ribbed



Ribbed - Koppen är utformad för att på ett lätthanterligt sätt följa tandens yta. Den klassiska varianten.

Ref kopp mjuk grå ribbed 144 st - 050101/1800

Ref kopp hård vit ribbed 144 st - 050301/1809


Samtliga gummikoppar är engångsprodukter. Symbolen är din garanti!



Pointed



Junior

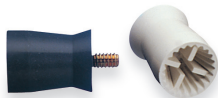

Pointed - Rekommenderas till approximala ytor samt implantat, under broar och andra svåråtkomliga områden. Mycket bra till "bandade" patienter.

Spetsig polerare, grå mjuk 144 st - ref 059101



Spetsig latexfri polerare, blå hård 144 st - ref 059701

Junior. Koppens utformning är likadan som Webbed, men Junior är kortare för bättre åtkomlighet. Rekommenderas för barn och ungdom.

Junior kopp mjuk grå 144 st - ref 051001

Junior kopp hård vit 144 st - ref 051501



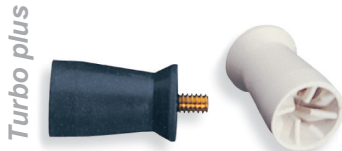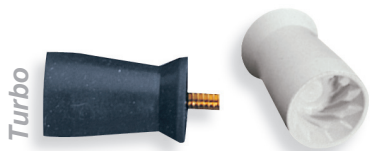

Turbo - latexfri. Koppen är räfflad motsols för att minska spridning av putspasta. En väldigt populär putskopp för en effektiv rengöring. ***Kopp mjuk grå Turbo 144 st - ref 052101/1900 eller kopp hård vit Turbo 144 st - ref 052301/1901***

Turbo plus. Koppens utformning är en kombination av Turbo och Webbed. Detta medför en effektiv rengöring och minimal spridning av putspasta. ***Kopp mjuk grå Turbo plus 144 st - ref 053101 och Turbo plus hård vit - ref 053301***

Nyhet! Nu finns Turbo plus även i latexfri: 053601 mjuk lila eller 053801 hård blå



Huvud Turbo plus



Young Dental har tillverkat gummikoppar av högsta kvalitet sedan 1920!

Storsäljare; **Dispo engångshuvud** ansluts på autoklaverbar underdel HP-44M. Levereras hygienförpackad med gummikopp.

Ref Huvud Turbo plus latexfri, lila, mjuk 200 st - 153620



Engångshuvud Elite



Elite, engångshuvud latexfri mjuk lila, ansluts på underdel HP-44M. Levereras hygienförpackad. Effektiv för rengöring med ännu mindre stänk. För extra stabilitet och känsla!

Ref huvud Elite latexfri 200 st per fp - 155620



Engångshuvud Petite



Petite, engångshuvud latexfri mjuk lila, ansluts på underdel HP-44M. Levereras hygienförpackad. Extremt effektiv för rengöring och litet smidigt huvud för bästa åtkomst.

Ref huvud Petite latexfri 200 st/fp - 154620





Proxeo



HP-44M Proxeo
Putsvinkelstycke 4:1, 10,000 rpm

Engångshuvuden monteras på HP-44M

Ref Proxeo inkl 200 st Turbo engångshuvud - DISPO3
Ref Proxeo inkl 200 st Petite engångshuvud - DISPO4
Ref Proxeo inkl 200 st Elite engångshuvud - DISPO5

Borste std



Borste standard fast är perfekt för avlägsning av beläggning från ocklusala fissurer och gropar samt för att förbereda tandytor före sealant och ortodontiska applikationer.

Ref Borste std 144 st/fp - 090101/0213

Borste std spetsig



Borste standard fast spetsig är perfekt avlägsning av beläggning från ocklusala fissurer och gropar samt för att förbereda tandytor före sealant och ortodontiska applikationer. Bra åtkomlighet då den är spetsformad.

Ref Borste std spetsig 144 st/fp - 090201/0230

Borste mini



Borste - mini. Används huvudsakligen på ocklusalytor, i fissursystem och i konkaviteter. Mindre i diameter än standardborsten och därför perfekt för svåråtkomliga områden som linguala ytor och områden runt tandställningar.

Ref Borste mini 144 st/fp - 090401/0220

**Borste mini
pointed**



Borste - mini spetsig. Används på ocklusalytor, i fissursystem och i konkaviteter. Bra åtkomlighet då den är spetsformad. Mindre i diameter än standardborste.

Ref Borste mini spetsig 144 st/fp - 090501/0240

Borste mjuk



Denna mjuka vita nylonborste är finare och mer flexibel än den vanliga borsten och är idealisk för rengöring runt implantat och tandställningar.

Ref Borste mjuk vit 144 st/fp - 090701/0212

Mandreller



Mandreller

Autoklaverbara mandreller (RA typ) av hög kvalitet i förnicklad mässing. De möjliggör användning av Youngs screw-in koppar och borstar på vanliga vinkelstycken med vinkelstycksfattning.

Ref Mandrell 14 mm, 12 st/fp - 282412

Ref Mandrell 16 mm, 12 st /fp - 282612

Kontakta din dentaldepå
eller W&H Nordic AB för
beställning eller information!

Tel: 08-445 88 30
office@whnordic.se
wh.com

W&H Nordic AB
Box 7037, 187 11 TÄBY
Tillverkarv 6, 187 66 TÄBY



· Makes you wanna smile ·

