

kuraray

Noritake

EN PUBLIKATION FRÅN KURARAY EUROPE BENELUX, NORDICS & BALTICS

MINIKATALOG

I SAMARBETE MED

GAMA

DENTAL AB

PANAVIA™ FAMILY
CLEARFIL MAJESTY™ ES
CLEARFIL™ BONDING

PANAVIA™

EN STARK FAMILJ

STARK OCH ESTETISK



PANAVIA™ V5

Det förutsägbara systemet för cementering, som pålitligt producerar en extremt stark och hållbar bindning och som samtidigt bidrar till högestetiska resultat.

FASAD- SPECIALISTEN



PANAVIA™ VENEER LC

Utmanande uppgift. Utmärkt lösning. Gör att du kan placera flera fasader på samma gång utan att behöva stressa innan härdningen börjar.

Standard Kit Universal (A2) Art: 4500-EU

Standard Kit Clear Art: 4501-EU



ETT TEAM SAMMA PRIMERS OAVSETT
VAL AV PASTA ALLA INDIKATIONER

FÖR MER
INFORMATION:



[kuraraynoritake.eu/se/
chairside/resin-cements](http://kuraraynoritake.eu/se/chairside/resin-cements)

PANAVIA™ V5

ALLA CEMENT INDIKATIONER. EN PRIMING PROCEDUR.

PANAVIA™ V5 är cementet för alla cementindikationer, oberoende av indikation eller vilket material som ska bondas! Den igenkännbara och förutsebara PANAVIA™ V5 arbetsflöde överraskar med sin unika enkelhet. Alltid samma cementeringsprocedur: förbehandla tandvävnaden med den speciella PANAVIA™ V5 Tooth Primer och CLEARFIL™

CERAMIC PRIMER PLUS för att förbehandla restaureringen. PANAVIA™ V5 är det mest starkaste cementet! Den finns dessutom i fem estetiska färger. Den aminfria pastan stärker hållbarheten och färgstabiliteten hos PANAVIA™ V5.

BEMÄSTRA HÖGESTETISK CEMENTERING MED PANAVIA™ Veneer LC

För smidig placering av (flera) fasader, är nya PANAVIA™ Veneer LC precis vad du behöver! Det ger dig enkel applicering, lång arbetstid (200 sek!) och bestående estetik. Allt detta kombinerat med den utmärkta bindningsstyrka Panavia är välkänt för! PANAVIA™ Veneer LC är ett ljushärdande resin-cement som är mycket okänsligt för omgivande ljus, vilket ger en

arbetstid på 200 sekunder*. Detta gör att du kan placera flera fasader på samma gång utan att behöva stressa innan härdningen börjar. Polymeriseringen kan startas när du är redo.

*Arbetstid under omgivande ljus (8000 lux): 200 sekunder.

FÖRUTSEBAR ARBETSFLÖDE¹

Tandläkaren följer samma enkla arbetsflöde för alla restaureringar, material eller indikationer.

1. Applicera CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS på restaureringen.
2. Applicera PANAVIA™ V5 Tooth Primer på tandvävnaden.
3. Applicera PANAVIA™ V5 på restaureringen och sätt på plats.



CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS Universal-primern för förbehandling lämpar sig för bonding till keramer, hybridkeramer och komposit samt metall. **Flaska 4 ml Art: 3637-EU**

¹ I bruksanvisningen finns kortfattade instruktioner om hur man applicerar rätt förbehandling och lämplig ljusintensitet.
² De faktiska färgerna kan avvika från färgerna i tryck.



PANAVIA™ V5 TOOTH PRIMER

PANAVIA™ V5 Tooth Primer binder till tandvävnad och härdar pastan. Först binder de original monomererna MDP till emaljen och dentinet. När PANAVIA™ V5 Tooth Primer kommer i kontakt med cementpastan påskyndas härdningsprocessen omedelbart genom den så kallade Touch-Cure-metoden. Resultatet blir en mycket väl polymeriserad pasta och högsta möjliga bindningsstyrka.

Flaska 4 ml Art: 3635-EU

PANAVIA V5 FEM ESTETISKA FÄRGER²

Med en nyans som matchar individuella krav, uppnås enkelt verklighetstroga resultat.

Refill 4,6 ml i spruta



Universal (A2)

Art 3611-EU



Clear

Art 3612-EU



Brown (A4)

Art 3613-EU



White

Art 3614-EU



Opaque

Art 3615-EU

Panavia V5 Universal (A2) standard kit
Art 3601-EU

Panavia V5 Clear standard kit
Art 3602-EU

KÄND BINDNINGSSTYRKA, EN FÖRUTSÄGBAR PROCEDUR,
EN UPPSÄTTNING PRIMERS, EN UPPSÄTTNING INPROVNINGSPASTOR,
TVÅ SPECIALCEMENT, ALLA INDIKATIONER!



CLEARFIL MAJESTY™ ES FAMILY

Från första början har Kuraray intagit en ledande roll genom att erbjuda kompositer av hög kvalitet. Efter att vi utvecklat ljusdiffusionsteknologin, gjorde vi det möjligt att enkelt uppnå hög estetik med kompositer. Detta har gjort att man över hela världen kan se välrenommerade kliniker gå över till kompositfamiljen CLEARFIL MAJESTY™ för sina arbeten och till patienternas glädje. Nu erbjuder vi dig tre utomordentliga medlemmar i kompositfamiljen. Oavsett om du letar efter en fullständig estetisk rekonstruktion av framtanden, en enkel restaureringsprocedur eller en mångsidig komposit, erbjuder CLEARFIL MAJESTY™-kompositfamiljen allt!

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Premium and Classic

HÖGESTETISK MULTI-OPACITET SKIKTNING

Med olika opaciteter tillgängliga, från högopaka dentinfärger via mellanopaka bodyfärger till semitranslucenta emaljfärger, erbjuder du en intuitivt skiktad komposit.

Fast färgurvalet begränsas till endast VITA™ A-färger, täcker du ändå in alla VITA-färger inklusive vit och extra vit.

Vid fall där olika opaciteter behövs är det här multi-opacitetssystemet det rätta valet för dig.



CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

DEN FÖRENKLADE LÖSNINGEN

Om du är ute efter snygga, väl adapterade restaurationer utan behov av varierande opaciteter, är CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL din partner. För alla restaurationer, oavsett kavitetsskala, behöver du bara en enda färg. Färgtagning hör till det förgångna. Med endast fyra färger som täcker in hela VITA-skalan, begränsar du även lagerhållningen drastiskt.



CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow

RESTAURERA, REPARERA CEMENTERA

Tror du fortfarande att flytande kompositer bara kan användas till klass V eller som liner? Tänk CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW från och med nu. Använd den till alla direkta restaurationer anterior och posterior. Det är inte allt. Den är även ett ljushärdande resincement som innehåller en unik silan LCSi och din främsta komposit för reparationer. CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW finns i tre olika flytbarheter. Produkten klippar inte och stannar på plats efter applicering. Poleringen är enkel och snabb och restaurationerna behåller sin glans.




INTELLIGENT OPTISK INTEGRATION

CLEARFIL MAJESTY™ ES-familjen kompositer har ärvt årtionden av silan- och fyllmedelsteknik. CLEARFIL MAJESTY™-produkterna är populära bland tandläkare världen över och är välkända för sin estetik, hållbarhet och låga slitage med tiden. En estetisk komposit måste kunna uppnå en naturlig optisk dynamik genom att ge rätt nivå av translucens, en sofistikerad småtaffekt och en naturlig lyster som inte bleknar med tiden.

LJUSDIFFUSIONSTEKNOLOGI

Ljusdiffusion är ett materials förmåga att sprida och reflektera ljusstrålar åt många olika håll. Kuraray Noritake Dental's ljusdiffusionsteknik (LDT) i kompositmaterial använder ljusspridande fillerpartiklar för att förbättra materialets estetiska egenskaper. Det ger en förmåga att sprida ljuset åt alla håll på ett sätt som efterliknar de naturliga tänderna, och leder till en högestetisk fyllning.

LDT får restorationerna att sprida ljus på samma sätt som dental vävnad gör. En konsekvens av detta är att materialet lätt och mjukt integreras med den omgivande tandstrukturen. Resultatet blir osynliga fyllningar. Kuraray har använt LDT i många år. Optimering av form, fördelning och mängd av ljusdiffusionsfillers har lett till skapandet av CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal.

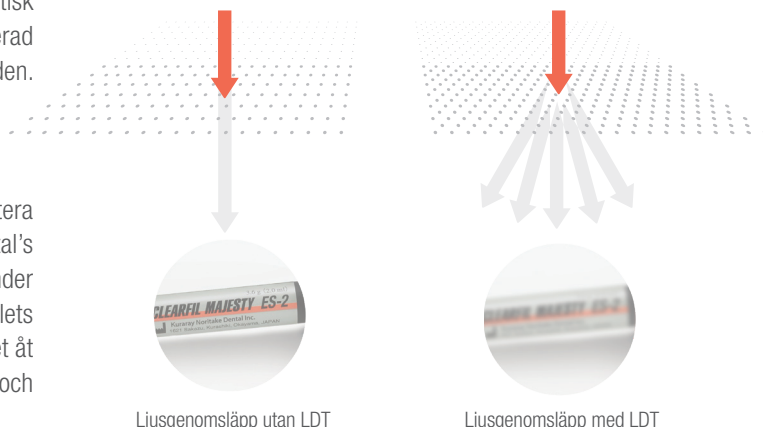


CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow återskapar tandstrukturens diffusionsegenskaper naturtroget. Den visar en högre grad av ljusdiffusion i de mer opaka nyanserna (dentin) och en lägre grad i de mer translucenta. I praktiken blir slutresultatet naturligt: den här ljusdiffusionen är det ultimata "verktyget" för att skapa en fyllning som utan ansträngning smälter in bland omgivande tänder.

HÅLLBARHET OCH ESTETIK

CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal fungerar oerhört bra vad gäller nyckelegenskaper för restorationer, anteriort såväl som i det posteriora området:

- ✓ Hög styrka och nötningsmotstånd
- ✓ Låg nötning på antagonisten
- ✓ Låg krympningsspänning
- ✓ Utomordentlig estetik
- ✓ Lätt att polera
- ✓ Bestående glans

BÖJHÅLLFASTHET (MPa)

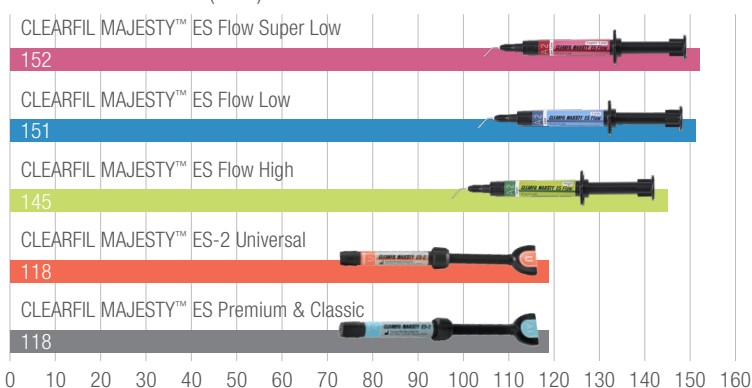

Posteriort: CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal välbalanserade egenskaper försäkrar en varaktigt stabil och slät yta, utan att antagonisten skadas. Materialets låga krympningsspänning vid polymerisationen hjälper till att förhindra marginell missfärgning och mikroläckage som kan leda till sekundärkaries.

Anterior: Estetik är av största vikt i det anteriora området. Med CLEARFIL MAJESTY™ ES-2:s väl genomtänkta utbud av färger och opaciteter, gör att du kan bygga upp alla främre områden samtidigt som du efterliknar alla tänder naturliga egenskaper. Dess lätta polerbarhet och långvariga glans gör dina restaureringar hållbara.

Se alla CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 på www.gama.se

CLEARFIL MAJESTY™ ES FLOW GER DIG DET BÄSTA AV TVÅ
VÄRLDAR I EN FLYTANDE FORM SOM DU SJÄLV VÄLJER!

FÖR MER
INFORMATION:



[kuraraynoritake.eu/se/
chairside/composites](http://kuraraynoritake.eu/se/chairside/composites)

SJÄLVETSNING TVÅ STEG BONDING

PRECISION BONDING SYSTEM FÖR HÖGSTÅENDE RESULTAT

CLEARFIL™ SE BOND



GOLD STANDARD FÖR ENASTÅENDE BINDNING

CLEARFIL™ SE BOND är Kurarays kliniskt beprövade självetsande adhesiv med höga prestanda för många indikationer. Den är känd för sin utmärkta spaltförsegling, tack vare sin starka vattenresistens. Två stegs adhesiven uppskattas av tandläkare och patienter eftersom den ger minimalt med postoperativ sensitivitet. Flera universitet och ledande bedömare anser att CLEARFIL™ SE BOND helt enkelt sätter standarden som Gold Standard. Tvåstegs självetsande adhesiv bonding består av två olika vätskor: en mild självetsande primer med låg teknisk sensitivitet och ett ljushärdande bondingmedel med hög förseglingsförmåga. Tack vare den milda, självetsande primern med låg teknisk känslighet och en hög förseglingsförmåga hos bindemedlet ger CLEARFIL™ SE BOND utmärkta långtidsprestanda.

Clearfil SE-Bond Komplet Kit Art: 1970-EU

FÖRDELAR

- ✓ Hållbar marginalförsegling tack vare en exceptionellt hög hydrolysisresistans och kraftig bindingsstyrka
- ✓ Minimal postoperativ sensitivitet
- ✓ Optimerad användbarhet och låg teknisk sensitivitet
- ✓ Vattenbaserad, mild självetsande primer
- ✓ Testat och beprövat självetsande bondingsystem i två steg

INDIKATIONER

- ✓ Direkta fyllningsrestaureringar med hjälp av ljushärdad komposit eller flow
- ✓ Kavitetförsegling som förbehandling för indirekta restaureringar
- ✓ Behandling av hypersensitiva och/eller exponerade rottytor
- ✓ Intraorala reparationer av frakturerade fasadkronor av keramer, hybridkeramer eller kompositresin med ljushärdande komposit
- ✓ Ytbehandling av protetiska konstruktioner av keramer, hybridkeramer och härdad komposit

SJÄLVETSNING ETT STEG BONDING

ALLA INDIKATIONER - EN BINDING

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



DU BEHÖVER INTE VÄNTA, LÄGGA PÅ FLERA LAGER ELLER HÅLLA PÅ ATT GNUGGA

Det innovativa universella bondingen har omedelbar inverkan och ger ett enhetligt och varaktigt resultat för alla restaurativa behandlingar – i ett snabbt, enkelt steg, kan tandläkaren bara applicera och fortsätta. Till skillnad från traditionella dentala bondingmedel som kräver väntetider, omfattande gnuggningar och multipla skikt för att ge ett optimalt resultat ger CLEARFIL™ Universal Bond Quick samma enhetliga, förutsebara resultat varje gång. Detta sparar inte bara tandläkarens värdefulla tid, utan eliminerar också risken för fel, vilket leder till att alla restaurativa procedurer utförs med samma exceptionellt höga standard. Den här produkten ger pålitliga bindningar för alla direkta restaureringar, pelaruppbyggnad samt även indirekta restaureringar och reparationer. Tandläkarna kan använda alla etsningsmetoder: självetsning, selektiv etsning eller totaletsning. CLEARFIL™ Universal Bond Quick ger samma enhetliga resultat utan några väntetider.

Flaska 5 ml Art: 3572-EU

FÖRDELAR

- ✓ Frihet att välja arbetsgång
- ✓ Brett indikationsområde
- ✓ Tunn filmtjocklek
- ✓ Snabb bindningsteknik
- ✓ Enhandsapplicering
- ✓ Hög bindningsstyrka
- ✓ Mindre kontamineringsrisk

INDIKATIONER

- ✓ Direkta restaureringar med ljushärdad kompositresin
- ✓ Kavitationsförsegling som förbehandling för indirekta restaureringar
- ✓ Behandling av exponerade rottytor
- ✓ Behandling av hypersensitiva tänder
- ✓ Intraorala reparationer av fakturerade restaureringar
- ✓ Cementering av stift och kronpelare
- ✓ Cementering av indirekta restaureringar

FÖR MER
INFORMATION:



[kuraraynoritake.eu/se/
chairside/adhesives](http://kuraraynoritake.eu/se/chairside/adhesives)

FÖR ALLA RESTAURATIONER. INTRA- OCH EXTRAORAL ANVÄNDNING

KATANA™ Cleaner



UNIVERSALRENGÖRINGSMEDEL FÖR ALLA ÄNDAMÅL


KATANA™ Cleaner's höga effektivitet vid rengöring intra- och extraoralt, ger tillbaka den ursprungliga bindningsstyrkan. KATANA™ Cleaner har en hög rengöringseffekt tack vare den ytaktiva egenskapen hos det integrerade MDP-saltet. KATANA™ Cleaner har ett pH på 4,5 vilket tillåter användning, inte bara extraoralt, utan även intraoralt. Gnid in, skölj och torka, det är allt du behöver göra för att optimera ditt cementering förfarande. Till skillnad mot andra rengöringsmedel som kräver längre ingnidningstider och endast tillåter extraoral användning krävs det endast 10 sekunder för KATANA™ Cleaner och kan användas både intra- och extraoralt.

Flaska 4 ml Art: 3970-EU

FÖRDELAR

- ✓ Intra och extraoral användning
- ✓ Applicera och gå vidare
- ✓ Enhandsdosering
- ✓ Avlägsnar effektivt kontaminering
- ✓ Optimerar adhesiva procedurer

SÅ HÄR FUNGERAR DET

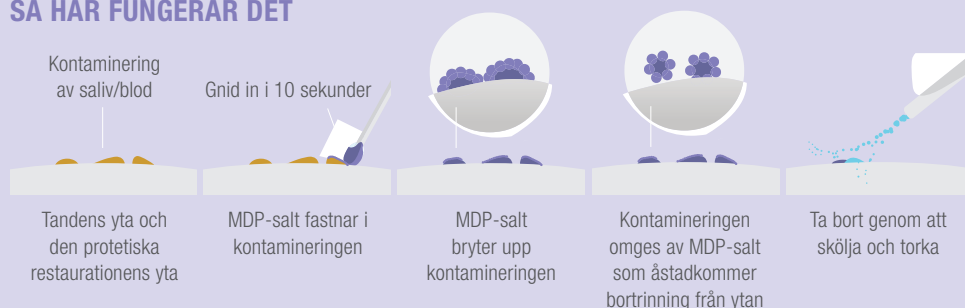

FÖR MER
INFORMATION:



[kuraraynoritake.eu/se/
katana-cleaner](http://kuraraynoritake.eu/se/katana-cleaner)

kuraray *Noritake*

Kuraray Europe Benelux B.V., Nordics & Baltics
Margadantstraat 20, 1976 DN IJmuiden, Nederländerna
inforordics@kuraray.com
kuraraynoritake.eu



Deyar Mahmood PhD, CDT
Affärsutvecklingschef Dental
0707 859 584
deyar.mahmood@kuraray.com

GAMA
DENTAL AB

Beställ via:
www.gama.se
08-199400